


IL TRATTAMENTO DI FOTORINGIOVANIMENTO

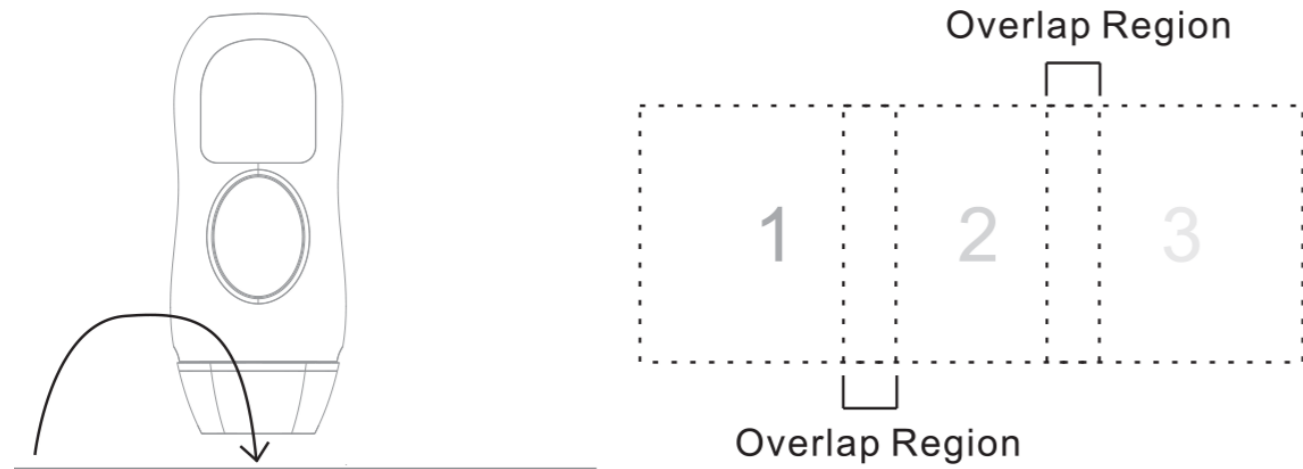

Le tipiche aree di trattamento fotoringiovanimento con D Light Aura sono il viso, il décolleté e il dorso delle mani. Con il trattamento fotoringiovanimento (SR) sarà possibile attenuare i primi segni dell'età stimolando la produzione di nuovo collagene, che rinnova, rassoda e rimpolpa la pelle, sarà inoltre possibile migliorare la texture generale della pelle e ravvivarne il colorito nel caso in cui questa presenti un tono grigiastro o slavato.

Eventuali nei, voglie o tatuaggi presenti nella zona da trattare, devono essere coperti prima di iniziare il trattamento, per proteggerli è possibile usare una matita da trucco bianca molto coprente oppure un prodotto specifico come D Light Patch Pro. Prima di iniziare il trattamento si consiglia di indossare occhiali protettivi certificati laser e luce pulsata, in alternativa è possibile chiudere gli occhi quando viene emesso il flash. Quando siete pronti, delimitate un'area da trattare e scegliete il livello di potenza più adatto al proprio fototipo.


È possibile scegliere tra due modalità di funzionamento: flash singolo oppure a scorrimento. Utilizzando la modalità flash singolo, viene emesso un flash ad ogni pressione del pulsante flash (2). La modalità scorrimento invece si attiva tenendo premuto per 3 secondi il pulsante flash (2) dopodiché sarà possibile rilasciarlo e l'apparecchio emetterà flash a ripetizione ogni volta che la finestra flash entrerà in contatto con la pelle; per disattivare la modalità scorrimento basta premere una volta il pulsante flash (2) e l'apparecchio riprende a funzionare in modalità flash singolo.

Quando la finestra flash si trova a corretto contatto con la pelle e la macchina è pronta per il flash, il display inizia a lampeggiare. Si consiglia di irradiare 1, massimo 2 volte ogni area da trattare per poi passare all'area successiva.

CICLO DI TRATTAMENTI FOTORINGIOVANIMENTO

Si consiglia di effettuare 1 trattamento alla settimana fino al raggiungimento dei risultati desiderati, se sulla stessa area si stanno facendo anche trattamenti di epilazione o acne, è importante far trascorrere almeno una settimana tra un trattamento e l'altro alternando il fotoringiovanimento agli altri trattamenti. Una volta raggiunti i risultati desiderati si possono sospendere i trattamenti settimanali e programmare trattamenti di mantenimento in base alle necessità individuali.

IL TRATTAMENTO ACNE

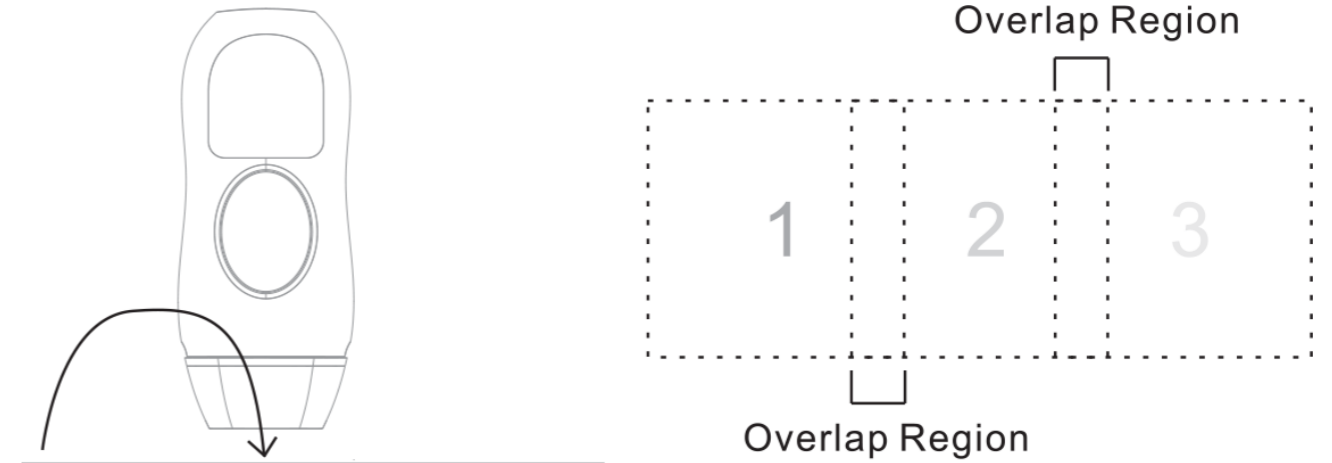

Il trattamento Rimozione Acne D Light Aura può essere usato in tutte le aree del corpo dove si presenta l'ineestetismo prestando particolare attenzione ed indossando occhiali protettivi quando si trattano le zone vicino agli occhi. La lampada acne lavora su di una lunghezza d'onda specifica per uccidere il batterio che causa l'acne (*Propionibacterium acnes*), inoltre il calore della luce pulsata secca il foruncolo accelerandone la guarigione e restringe i pori prevenendo il nuovo insorgere del problema.

Si consiglia di evitare il trattamento su voglie o tatuaggi, se l'area da trattare presenta nei, questi devono essere prima coperti con una matita da trucco bianca molto coprente o con un prodotto specifico come D Light Patch Pro. Prima di iniziare il trattamento si consiglia di indossare occhiali protettivi certificati laser e luce pulsata, in alternativa è possibile chiudere gli occhi quando viene emesso il flash. Quando siete pronti, delimitate un'area da trattare e scegliete il livello di potenza più adatto al proprio fototipo.

È possibile scegliere tra due modalità di funzionamento: flash singolo oppure a scorrimento. Utilizzando la modalità flash singolo, viene emesso un flash ad ogni pressione del pulsante flash (2). La modalità scorrimento invece si attiva tenendo premuto per 3 secondi il pulsante flash (2) dopodiché sarà possibile rilasciarlo e l'apparecchio emetterà flash a ripetizione ogni volta che la finestra flash entrerà in contatto con la pelle; per disattivare la modalità scorrimento basta premere una volta il pulsante flash (2) e l'apparecchio riprende a funzionare in modalità flash singolo.

Quando la finestra flash si trova a corretto contatto con la pelle e la macchina è pronta per il flash, il display inizia a lampeggiare. Si consiglia di irradiare 1, massimo 2 volte ogni area da trattare per poi passare all'area successiva.

CICLO DI TRATTAMENTI ACNE

Si consiglia di effettuare 1 trattamento alla settimana fino al raggiungimento dei risultati desiderati, se sulla stessa area si stanno facendo anche trattamenti di epilazione o fotoringiovanimento, è importante far trascorrere almeno una settimana tra un trattamento e l'altro alternando il trattamento Acne agli altri trattamenti. Una volta raggiunti i risultati desiderati si possono sospendere i trattamenti settimanali e programmare trattamenti di mantenimento in base alle necessità individuali.